


Modelo Cónico

Modelo Cónico

32 x 26	150 FF 25
34 x 28	150 FF 25
36 x 30	150 FF 25
38 x 32	150 FF 25
40 x 34	150 FF 25
42 x 36	150 FF 25
44 x 38	150 FF 25
46 x 40	150 FF 25

Free Flow - FF25 (Con parche de protección)

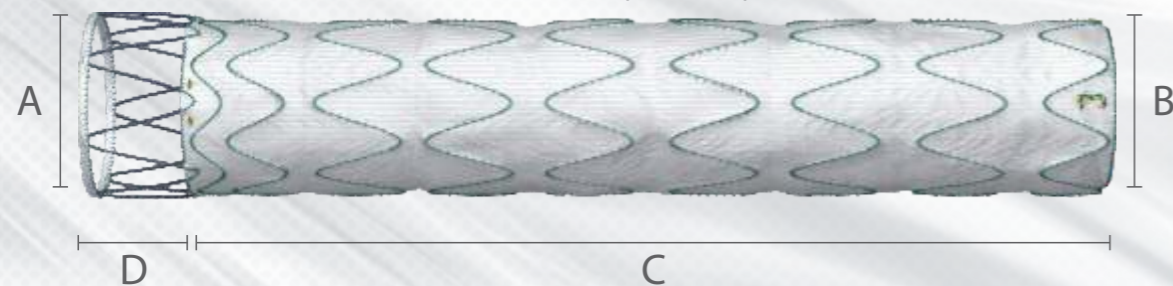

Modelo Recto


A	B	C	D
Diámetro Proximal 28 a 46 mm	Diámetro Distal 26 a 46 mm	Largo 110 - 130 - 150 - 190 mm	Acabamiento Free Flow 25 mm
Perfil 18 e 20 Fr			

*** Consulte disponibilidad de personalizacion/otras medidas**



DOMINUS

Endoprótesis Stent-Graft Dominus

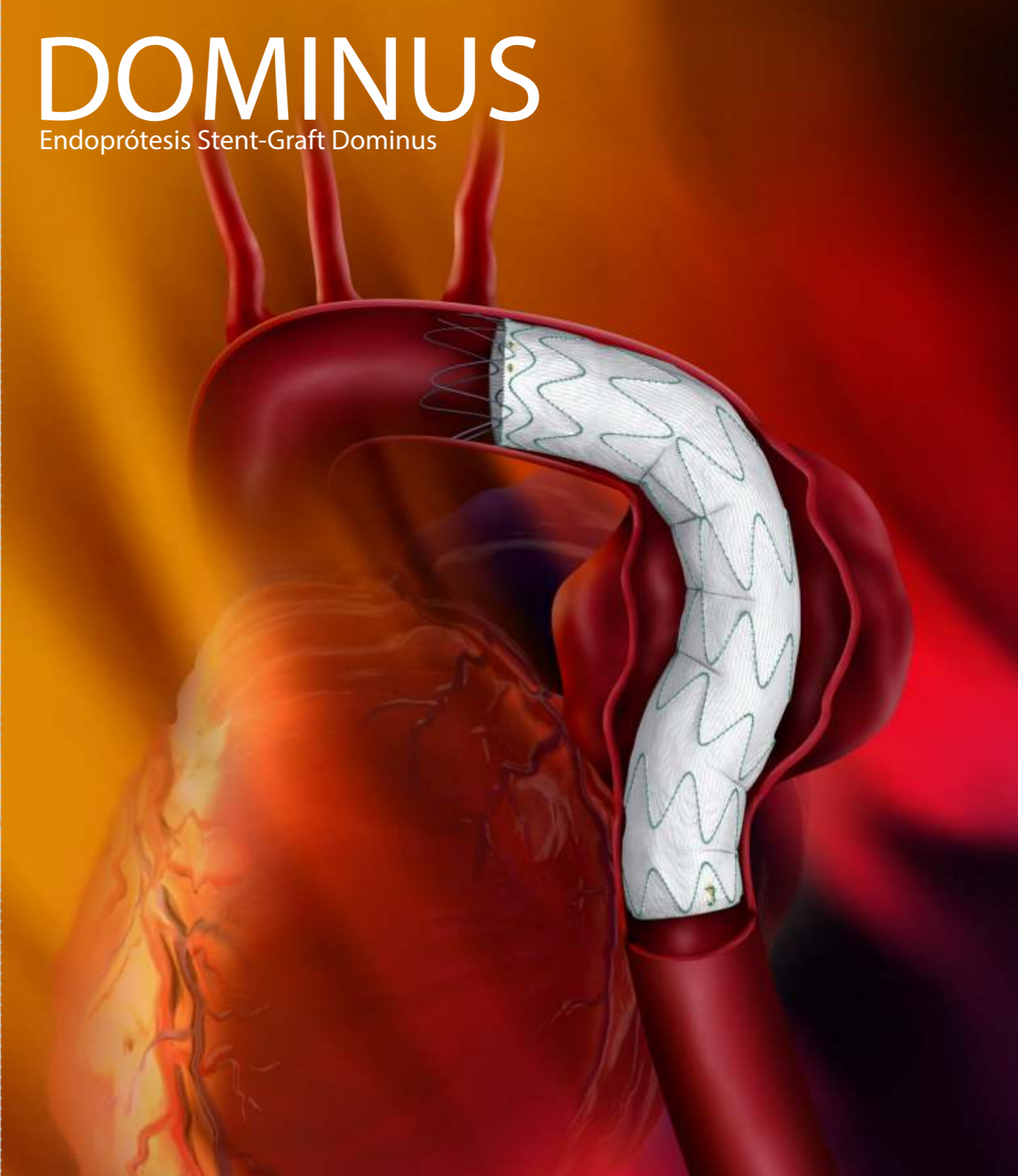



► **Punta Flexible**

Radiopaca atraumática

► **Hidrofilico**

Revestimiento hidrófilo para reducir la fricción

► **Antitorsi3n**

Para una mejor navegabilidad

► **Precisi3n**

Sistema multiplicador de fuerza

Traba de seguridad

BAJO PERFIL
18-20Fr

- Flexibilidad
- Mejor precisi3n y seguridad
- Menos fricci3n

Gran resistencia a la corrosi3n y a la fatiga
Endopr3tesis metálica autoexpandible,
revestida con poliéster con estructura de
Nitinol.

► **Libre Circulaci3n**

Stent no revestido para expandir el punto de fijaci3n

► **Sutura**


Sutura realizada en poliéster para fijaci3n de la estructura metálica

► **Revestimiento**

Poliéster tubular de baja porosidad

► **Nitinol (níquel y titanio)**

Aleaci3n metálica súper elástica con memoria térmica

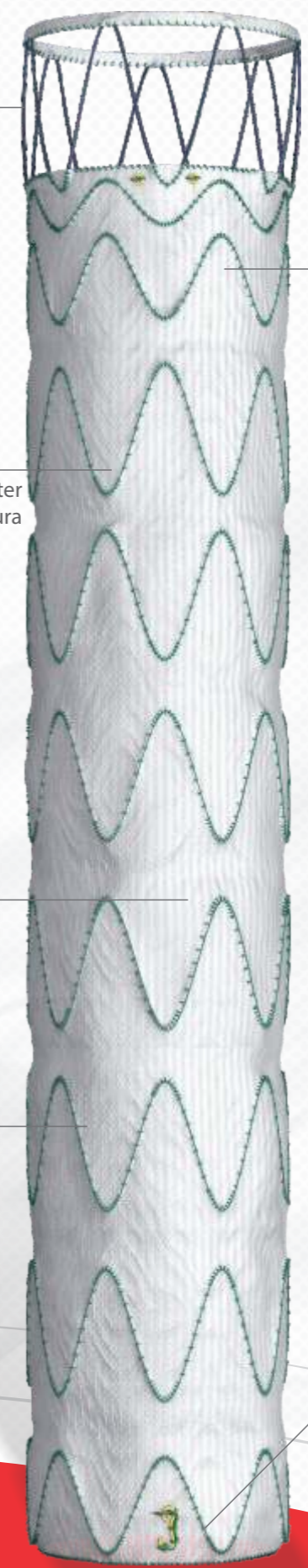

► **Fuerza Radial**

Áreas proximal y distal con fuerza radial aumentada para una mejor fijaci3n y sellado.

► **Marcas Radiopacas**
Revestimiento

Proximal y distal para facilitar la puesta en posici3n y ubicaci3n de la endopr3tesis



► **Catéter de Bal3n**

Flexible para acomodar la endopr3tesis 12Fr/45mm
Suministrado por separado

Fijaci3n por medio de Fuerza Radial
Sobremedida recomendada de un 15 a un 20% respecto al diámetro del cuello de fijaci3n