

# Anillo de Anuloplastia Valvular Rígido - Gregori



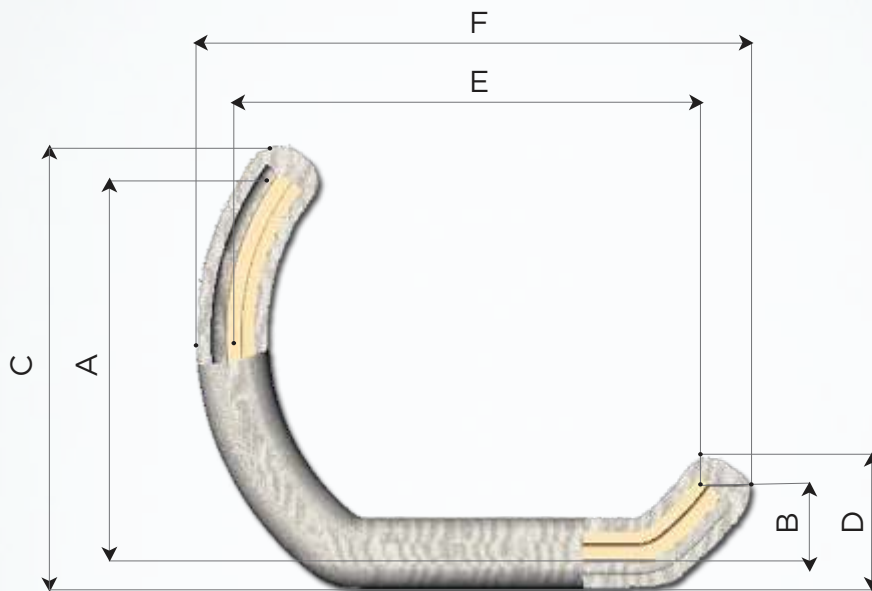
Manejo Sencillo  
Reestructuración precisa del Anillo Mitral  
Abierto, permitiendo  
Crecimiento del Anillo Mitral  
Experiencia

**Descripción:**

En forma de medialuna con la parte rectificada desde su punto promedio hasta el siguiente en relación a su extremo que va a corresponder a la comisura trasera mediana. Fechos en acero inoxidable, recubierto por un tubo de silicona y revestido de poliéster.

**Indicación:**

El Anillo de Anuloplastia Valvular Rígido Gregori se utiliza para reparación de la válvula mitral en cirugía reconstructiva de la válvula, cuyo objetivo es recolocar la válvula mitral retraída en la posición anatómica natural, reestructurar las comisuras y corregir la dilatación del anillo mitral, distribuyendo las fuerzas de tracción por medio de arrugamiento.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (mm)**

Tamaño	A ± 0,5	B ± 0,5	C ± 0,5	D ± 0,5	E ± 0,5	F ± 0,5	Código
24	17	3	18,5	4,5	20,5	22	2158
26	18	3	19,5	4,5	22,5	24	2161
28	20	3	21,5	4,5	24,5	26	2474
30	21	3	22,5	4,5	26,5	28	2187
32	22	4	23,5	5,5	27,5	29	2190
34	24	4	25,5	5,5	29,5	31	2202
36	25,5	4	27	5,5	30,5	32	2215
38	27	4	28,5	5,5	33,5	35	42147