


# CÂNULA ARTERIAL FEMORAL - AGILE®

com BRCoating®

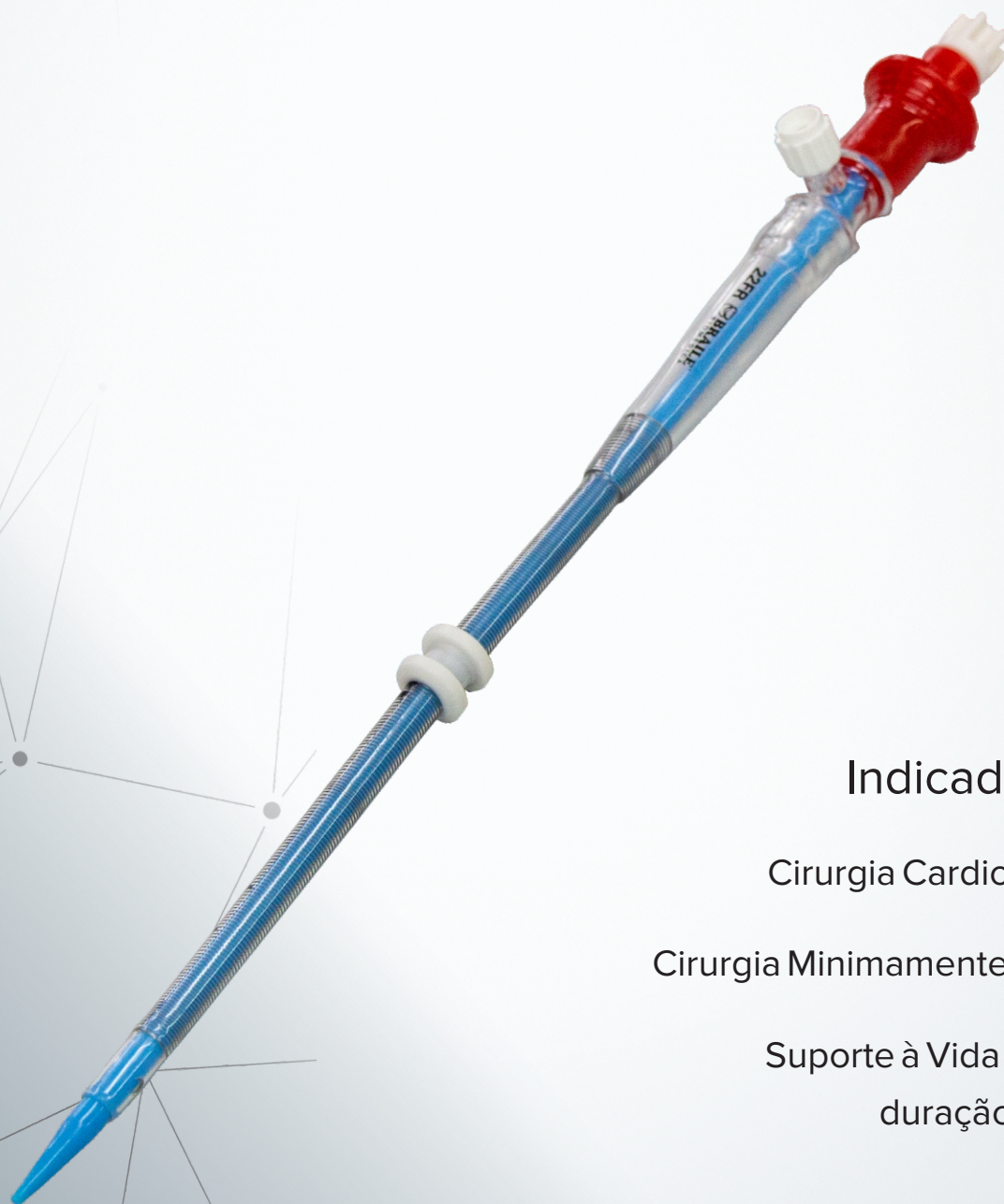

Indicada para:

Cirurgia Cardiovascular

Cirurgia Minimamente Invasiva

Suporte à Vida de longa  
duração (ECMO)

 **BRAILE**<sup>®</sup>  
BIOMÉDICA

**Descrição:** A Cânula Arterial Femoral Agile® com revestimento BRCoating® é uma cânula feita de PVC, mola de fio aço inox, um introdutor de PVC que permite passagem de fio guia 0,038' e um conector em policarbonato que permite a conexão como circuito de circulação extracorpórea. A Cânula é tratada com o revestimento biocompatível BRCoating®, composto por albumina humana recombinante, essa solução reveste a superfície interna do produto diminuindo a interação do sangue com o mesmo. Todos os componentes são constituídos por materiais de grau médico, atóxicos, biocompatíveis e apirogênicos.

**Indicação:** A Cânula Arterial Femoral Agile® com revestimento BRCoating® é indicada para canulação da arterial femoral comum em circuitos de circulação extracorpórea, em cirurgias convencionais e sistemas de ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) indicado para ECLS (extracorporeal life support) em pacientes com falência cardíaca e/ou falência respiratória.

### Especificações Técnicas:

Descrição	Código	French	Comprimento da Cânula	Número de Furos	Diâmetro
Cânula Arterial Femoral Agile® III 18Fr com revestimento BRCoating®	616323	18Fr	23cm	2	3/8"
Cânula Arterial Femoral Agile® III 20Fr com revestimento BRCoating®	616324	20Fr	23cm	2	3/8"
Cânula Arterial Femoral Agile® III 22Fr com revestimento BRCoating®	616325	22Fr	23cm	2	3/8"

