

# Stent-Graft Cirúrgico




 **BRAILE**

LIFE-SAVING TECHNOLOGIES

A Endoprótese Auto-Expansível Stent-Graft Cirúrgico da Braile é composta por uma prótese intraluminal reta e um cateter de liberação.

A prótese é confeccionada em NITINOL e revestida com tecido de poliéster. É autoexpansível e apresenta alta resistência radial, sendo comprimida e inserida em cateteres de PTFE de 24 Fr. O cateter foi desenvolvido para a liberação da prótese por acesso à aorta em procedimentos cardio-torácicos com circulação extracorpórea (CEC).

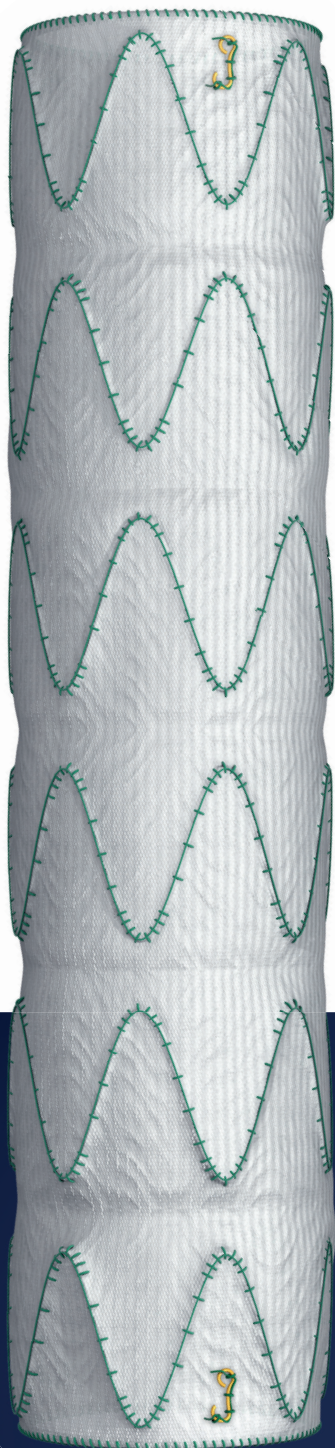

## Sutura

Suturas em poliéster para fixação do esqueleto metálico




## Revestimento

Poliéster tubular de baixa porosidade

## Indicação

O produto é indicado para pacientes sintomáticos com dissecção de aorta torácica descendente cuja lesão da íntima esteja localizada a partir de 3 a 4 cm do óstio da artéria subclávia esquerda, considerando que não há dados suficientes sobre paraplegia em lesões próximas ao diafragma tratadas com endopróteses.

Também é indicado para pacientes com aneurisma verdadeiro da aorta torácica descendente limitado à primeira porção após a artéria subclávia esquerda e para pacientes com dissecção da aorta do tipo A com reentrada na aorta descendente, após correção convencional da aorta ascendente e oclusão da reentrada com a endoprótese.

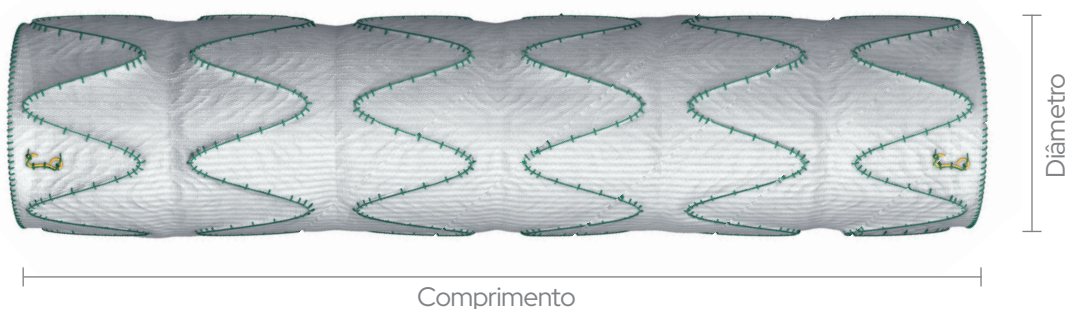


Código	Descrição - Diâmetro(mm) x Comprimento (mm)	Perfil
223922	Endoprótese Auto-expansível Stent-Graft Cirúrgico 26/75	24 Fr
223931	Endoprótese Auto-expansível Stent-Graft Cirúrgico 26/115	24 Fr
223940	Endoprótese Auto-expansível Stent-Graft Cirúrgico 26/150	24 Fr
223959	Endoprótese Auto-expansível Stent-Graft Cirúrgico 28/75	24 Fr
223968	Endoprótese Auto-expansível Stent-Graft Cirúrgico 28/115	24 Fr
223977	Endoprótese Auto-expansível Stent-Graft Cirúrgico 28/150	24 Fr
223986	Endoprótese Auto-expansível Stent-Graft Cirúrgico 30/75	24 Fr
223995	Endoprótese Auto-expansível Stent-Graft Cirúrgico 30/115	24 Fr
224004	Endoprótese Auto-expansível Stent-Graft Cirúrgico 30/150	24 Fr
224013	Endoprótese Auto-expansível Stent-Graft Cirúrgico 32/75	24 Fr
224022	Endoprótese Auto-expansível Stent-Graft Cirúrgico 32/115	24 Fr
224031	Endoprótese Auto-expansível Stent-Graft Cirúrgico 32/150	24 Fr
224040	Endoprótese Auto-expansível Stent-Graft Cirúrgico 34/75	24 Fr
224059	Endoprótese Auto-expansível Stent-Graft Cirúrgico 34/115	24 Fr
224068	Endoprótese Auto-expansível Stent-Graft Cirúrgico 34/150	24 Fr




O cateter de liberação foi desenvolvido para facilitar a colocação da endoprótese através de procedimento cirúrgico. A bainha é feita de PTFE, material hidrofílico e transparente que permite bom escorregamento durante a introdução e visualização da prótese durante o procedimento.

O Cateter possui trava para segurança de manuseio e para evitar liberação indesejada.

Nos siga nas redes sociais:

 /brailebiomedica

 @brailebiomedica



**Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.**

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 | Jardim Tarraf I

CEP 15091-450 | São José do Rio Preto - SP | Brasil

CNPJ: 52.828.936/0001-09 | Anvisa no. 10159030062

Responsável técnico: Vlademir D. A. Ramirez - CRF-SP 09010