




Modelo Cônico

Modelo Cônico

32 x 26	150 FF 25
34 x 28	150 FF 25
36 x 30	150 FF 25
38 x 32	150 FF 25
40 x 34	150 FF 25
42 x 36	150 FF 25
44 x 38	150 FF 25
46 x 40	150 FF 25

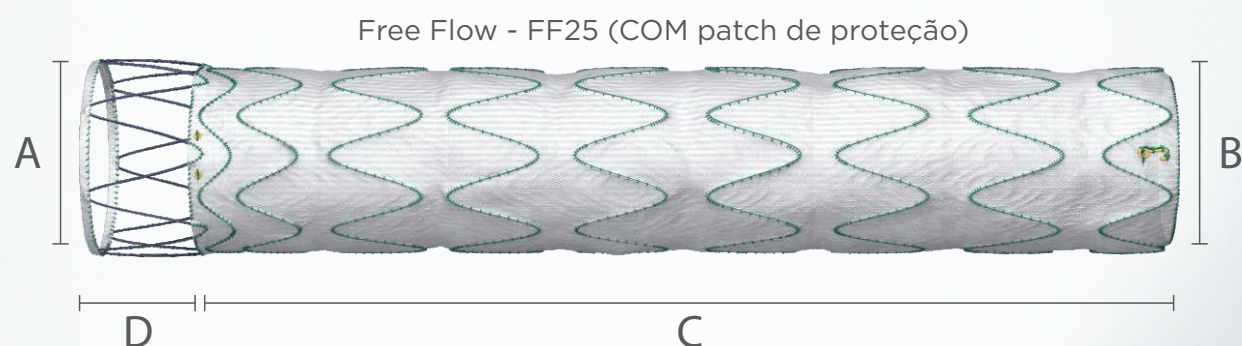

Free Flow - FF25 (COM patch de proteção)

Modelo Reto

A	B	C	D
Diâmetro Proximal 26 a 46 mm	Diâmetro Distal 26 a 46 mm	Comprimentos 110 - 130 - 150 190 mm	Acabamento Free Flow 25 mm
Perfil 18 e 20 Fr			


***Consulte disponibilidade de customização / outras medidas.**

Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.
Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone #55 17 2136 7000 • Fax #55 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936/0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro ANVISA nº 10159030093
www.braile.com.br



DOMINUS[®]

ENDOPRÓTESE STENT GRAFT

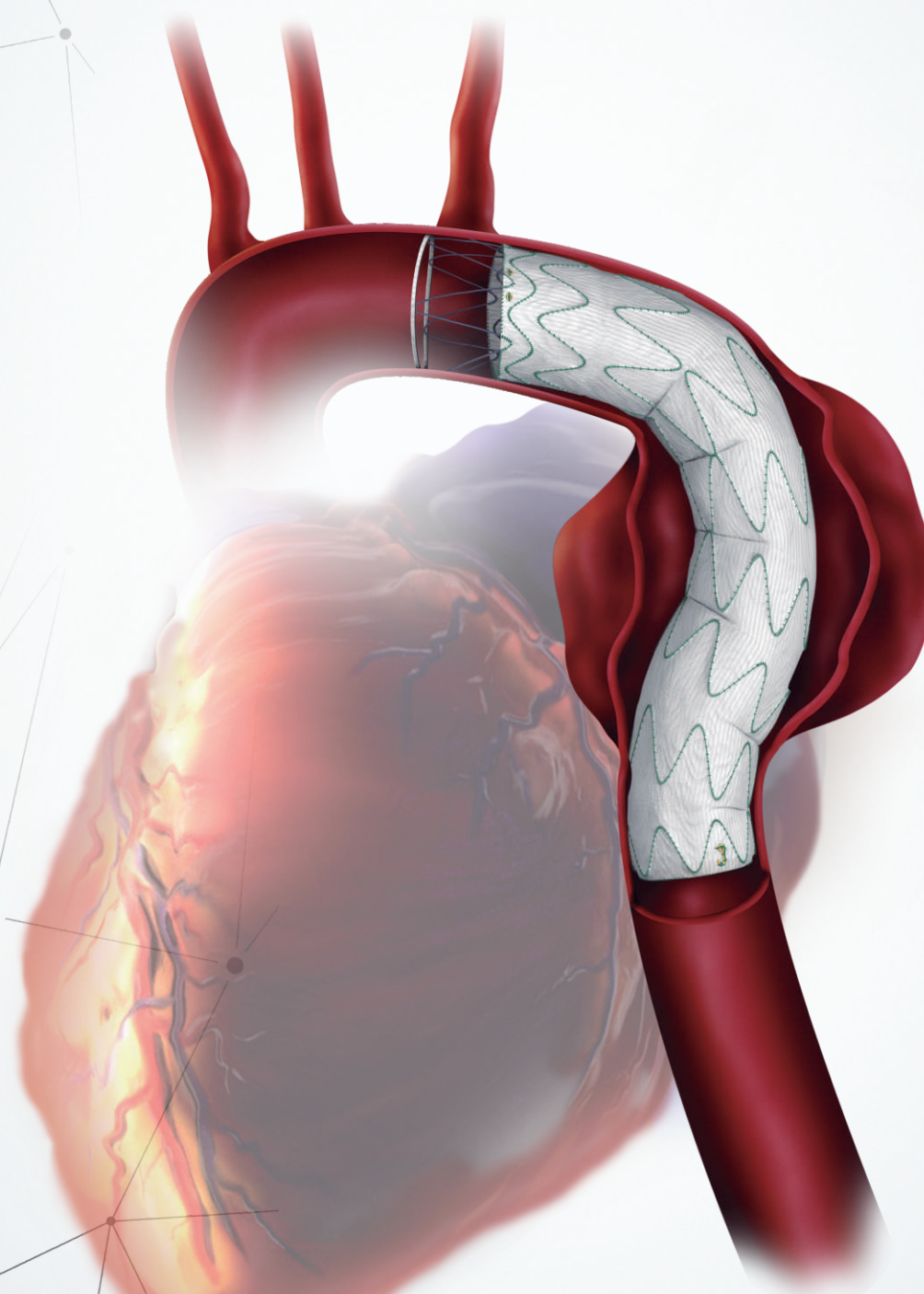




Endoprótese metálica autoexpansível,
revestida de poliéster com estrutura de Nitinol.
Fixação por Força Radial.


► **Free Flow**

Stent não revestido para
expansão da região de fixação

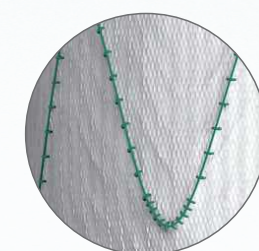

► **Sutura**

Suturas em poliéster
para fixação do
esqueleto metálico

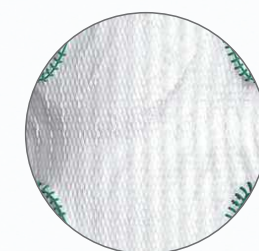


► **Revestimento**

Poliéster tubular de
baixa porosidade

► **Nitinol**

Liga metálica superelástica
com memória térmica
Grande resistência à
corrosão e fadiga

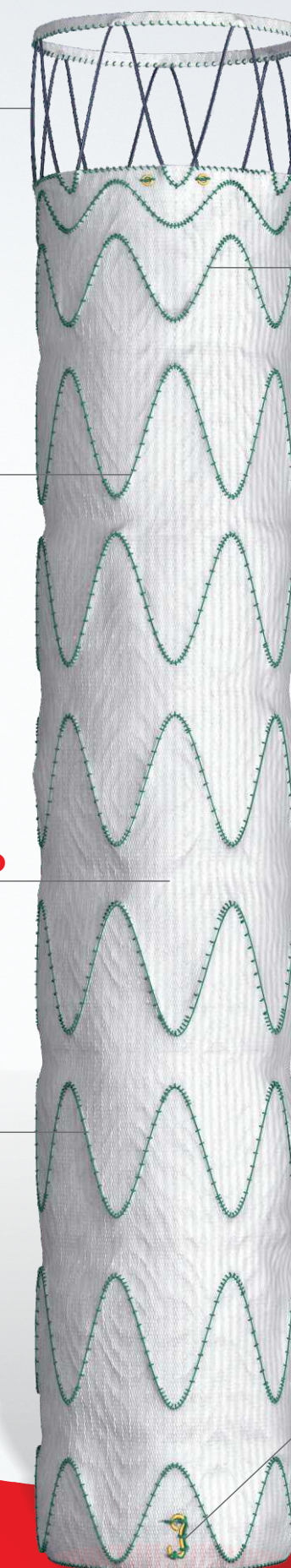


► **Força Radial**

Regiões proximal e distal com
força radial aumentada para
melhor fixação e vedação

► **Marcas Radiopacas**

Proximais e distais para
facilitar posicionamento e
localização da endoprótese

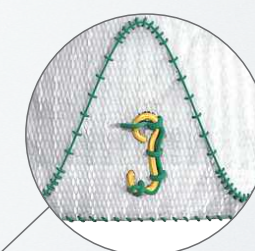

► **Cateter Balão**

Complacente para acomodação
da endoprótese 12Fr/45mm
Fornecido separadamente

Oversize recomendado de 15 a 20% sobre
diâmetro do colo de fixação.