

# SAFESYNC<sup>®</sup>

Tecnologia e saúde em sincronia




 BRAILE  
LIFE-SAVING TECHNOLOGIES

A Prótese Valvular Biológica INOVARE® SAFESYNC – B-Delivery System é indicada para o tratamento de pacientes sintomáticos com estenose valvar aórtica (EAo) severa que, possuam o risco previsto de mortalidade alto aos 30 dias, baseado na pontuação de risco da Sociedade de Cirurgiões Torácicos (STS score) e outras comorbidades não pontuadas pelo score, sendo julgados apropriados para o tratamento de substituição de valva aórtica por via transcateter (transcatheter aortic valve replacement, TAVR) com acesso transfemoral.

**Projetada para se ajustar com mais precisão no anel aórtico, evitando expansão insuficiente ou excessiva.**



Tamanho	Ø20 mm	Ø22 mm	Ø24 mm	Ø26 mm	Ø28 mm	Ø30 mm
Altura	18 mm	18 mm	20 mm	20 mm	22 mm	22 mm
Área Nominal	314 mm <sup>2</sup>	380 mm <sup>2</sup>	452 mm <sup>2</sup>	531 mm <sup>2</sup>	616 mm <sup>2</sup>	707 mm <sup>2</sup>
Área Ânulo da Valva Aórtica	251 - 299	299 - 362	362 - 431	425 - 506	493 - 586	565 - 673
Diâmetro Mínimo do Vaso	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	6,0 mm	6,0 mm	6,5 mm
Códigos	620529-20/18 620535-20/20	620530-22/18 620536-22/20	620531-24/18 620537-24/20	620532-26/18 620538-26/20	620533-28/18 620539-28/20	620534-30/18 620540-30/20

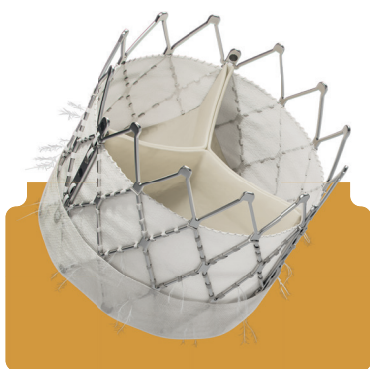

## Foreshortening mínimo

De 0,6 ~2,8 mm

A prótese SafeSync possui uma das menores taxas de encurtamento do mercado, devido sua construção com a adição de três postes longitudinais, garantindo estabilidade e precisão para um implante seguro e eficaz.

A confecção dos folhetos à partir de um único patch de pericárdio garante um menor número de suturas na prótese e com isso uma maior área de orifício efetivo (AOE).





### Células abertas grandes

Facilitam o acesso ao óstio coronariano



### Saia externa em poliéster (PET)

Vedação eficiente - eficácia na redução do vazamento paravalvar



### Postes com marcadores radiopacos

Permitem o alinhamento comissural  
Estabilidade, precisão e segurança



### Liga de cromo-cobalto

Estrutura com força radial aumentada e recuo reduzido


## B-DELIVERY SYSTEM<sup>®</sup>



### Sistema de entrega semi coberto

- Estabilidade da válvula durante a navegação.
- Segurança para cruzar a válvula estenótica.

## Kit composto por:

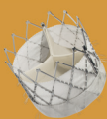


1x Safesync



1x B-Delivery System



1x Crimpador

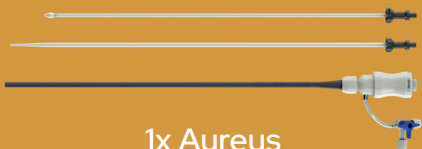

1x Aureus



1x Balão de Pré-dilatação

