


PRÓTESE VALVULAR ORGÂNICA BIOLÓGICA DE PERICÁRDIO BOVINO



Experiência
Qualidade
Performance

Descrição: A Prótese Valvular Orgânica Biológica de Pericárdio Bovino é constituída de pericárdio bovino tratado com glutaraldeído e preservado com formaldeído a 4%. Este tratamento confere-lhe características adequadas de resistência, flexibilidade e ausência de antigenicidade. A bioprótese é confeccionada sobre um suporte de poliacetal revestido com pericárdio bovino sobre o qual são montadas as cúspides. Um fio especial de aço inoxidável, inserido externamente no anel de suporte, reforça a consistência da base do anel e permite identificar a posição da bioprótese no paciente por simples exame radiológico.

Indicação: A Prótese Valvular Orgânica Biológica de Pericárdio Bovino é indicada para substituição da Valva Mitral, Aórtica, Tricúspide ou Pulmonar.

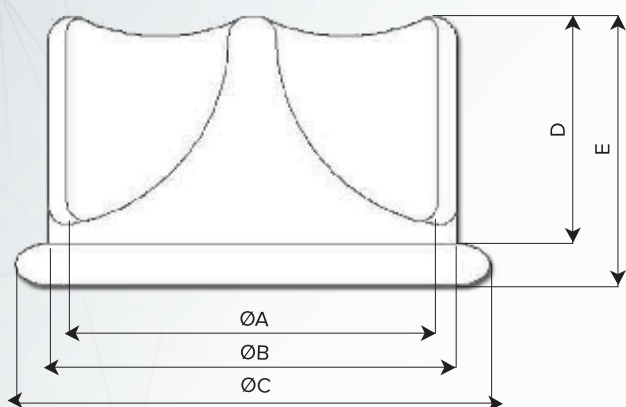

Especificações Técnicas

Tamanho	ØA ± 0,5 mm	ØB ± 0,5 mm	ØC ± 1,0 mm	D ± 0,5 mm	E ± 0,5 mm	Grad. Médio de Pressão (mmHg)	Área Efetiva do Orifício (cm)	Código Aórtico	Código Mitral
19	14	19	23	7	10	10,98	1,10	8316	-
21	16	21	25	8	11	4,68	1,50	8329	-
23	18	23	27	9	12	4,10	1,72	8332	-
25	20	25	29	10	13	3,65	1,95	8358	101347
27	22	27	31	11	14	2,42	2,47	8361	101356
29	24	29	33	12	15	1,55	3,07	8374	101392
31	26	31	35	13	16	1,33	3,45	-	8387
33	28	33	37	13	16	0,56	3,88	-	8390
35	30	35	39	14	17	0,54	4,27	-	8402