

# Anillo de Anuloplastia Valvular Rígido - Braile



Experiencia  
Calidad  
Rendimiento

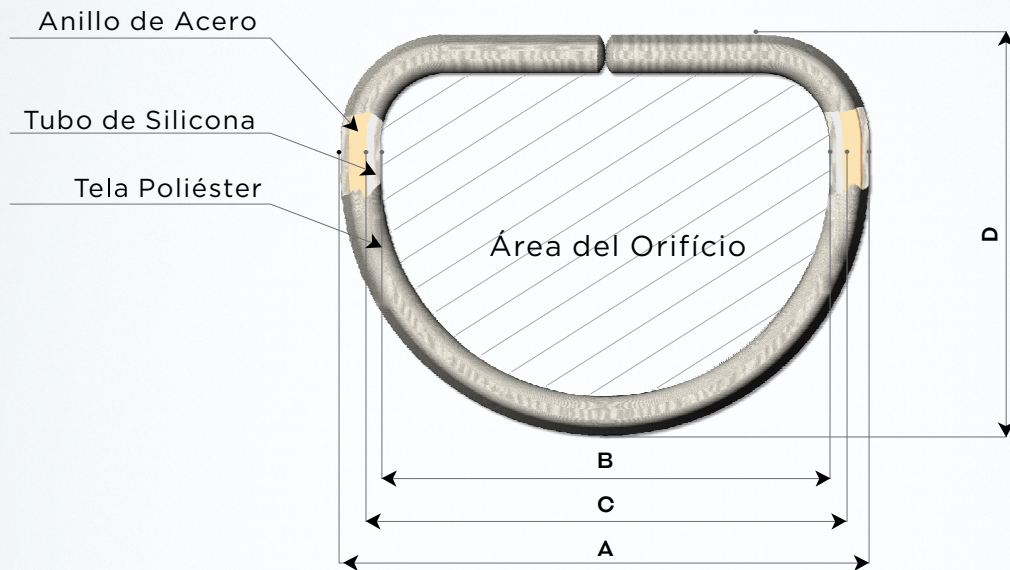
 **BRAILE**<sup>®</sup>  
BIOMÉDICA

**Descripción:**

El Anillo de Anuloplastia Valvular Rígido - Braile es constituido de acero inoxidable y cubierto por un tubo de silicona y revestido con poliéster.

**Indicación:**

El Anillo de Anuloplastia Valvular Rígido se utiliza para reparación de la válvula mitral en cirugía reconstructiva de la válvula mitral, cuyo objetivo es recolocar la válvula mitral retraída en la posición anatómica natural, reestructurar las comisuras y corregir la dilatación del anillo mitral, distribuyendo las fuerzas de tracción por medio de arrugamiento.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Tamaño	A(mm) ± 0,5 (mm)	B(mm) ± 0,5 (mm)	C(mm) ± 0,5 (mm)	D(mm) ± 0,5 (mm)	Área del Orificio (cm <sup>2</sup> ) ± 20	Código
24	28,3	23,1	24	21,2	308	2088
26	30,3	25,1	26	23,2	379	2091
28	32,3	27,1	28	25,2	456	2103
30	34,3	29,1	30	27,2	539	2116
32	36,3	31,1	32	29,2	629	2129
34	38,3	33,1	34	31,2	725	2132
36	40,3	35,1	36	33,2	826	2145
38	42,3	37,1	38	35,2	938	202915