




Modelo Cónico

Modelo Cónico

32 x 26	150 FF 25
34 x 28	150 FF 25
36 x 30	150 FF 25
38 x 32	150 FF 25
40 x 34	150 FF 25
42 x 36	150 FF 25
44 x 38	150 FF 25
46 x 40	150 FF 25

Free Flow - FF25 (CON parche protector)

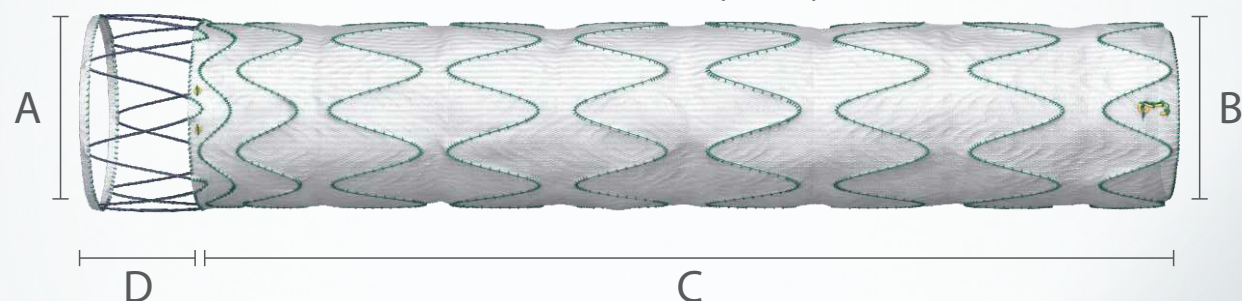


Modelo Recto

A	B	C	D
Diámetro Proximal 26 a 46 mm	Diámetro Distal 26 a 46 mm	Largos 110 - 130 - 150 190 mm	Acabado Free Flow 25 mm
Perfil 18 e 20 Fr			

* Remítase a la disponibilidad de otras dimensiones.

DOMINUS[®]

ENDOPRÓTESIS STENT GRAFT

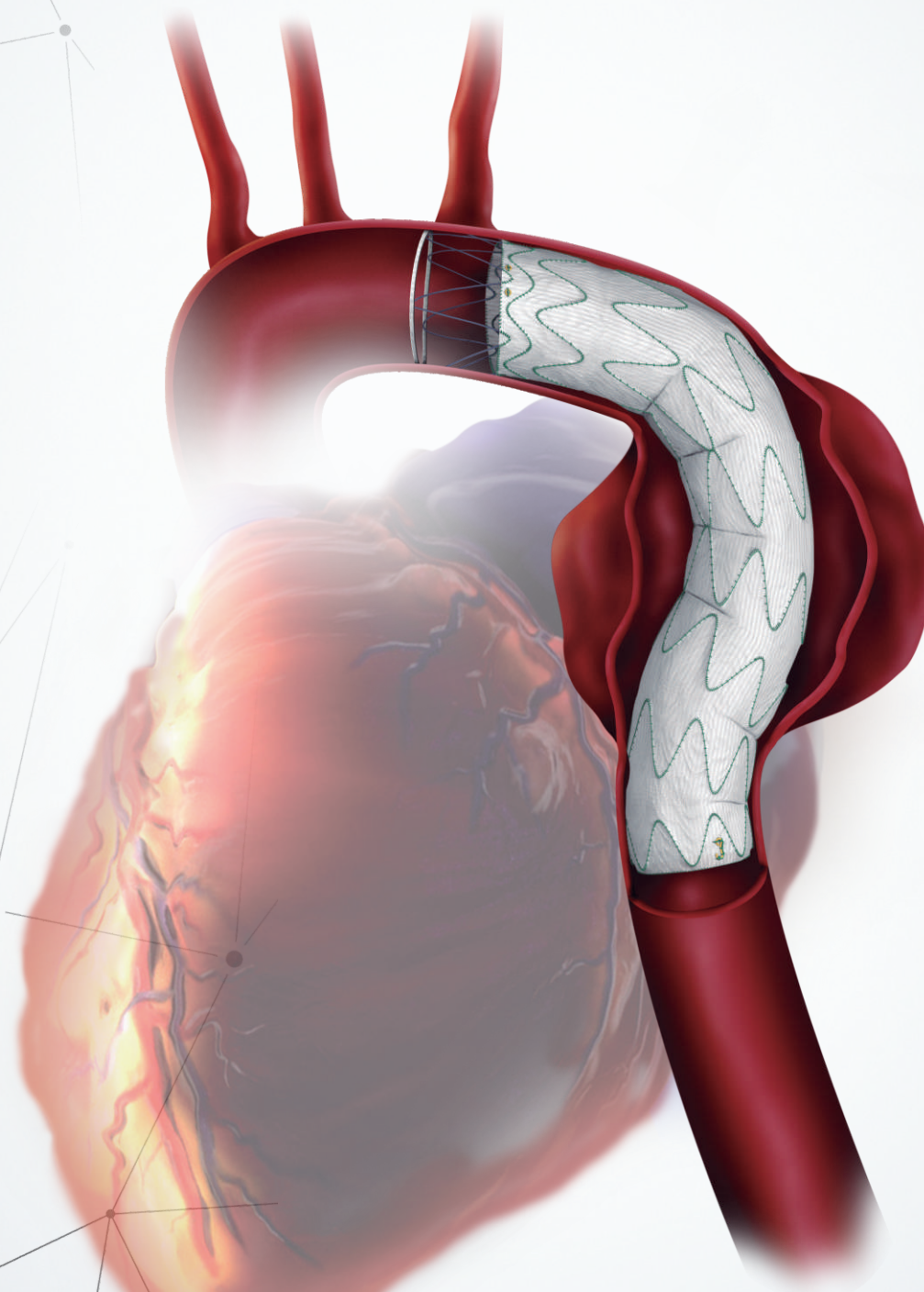

Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.
Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone #55 17 2136 7000 • Fax #55 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936/0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro ANVISA nº 10159030093
www.braile.com.br

BRAILE
BIOMÉDICA


BRAILE
BIOMÉDICA



Gran resistencia a la corrosi3n y a la fatiga
Endopr3tesis metálica autoexpandible,
revestida con poliéster con estructura de Nitinol.


► **Free Flow**

Stent no revestido para expandir el punto de fijaci3n

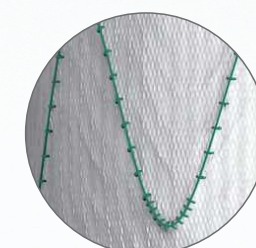

► **Sutura**

Sutura realizada en poliéster para fijaci3n de la estructura metálica

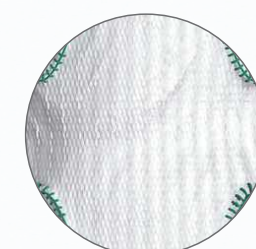

► **Revestimiento**

Poliéster tubular de baja porosidad

► **Nitinol**

Aleaci3n metálica súper elástica con memoria térmica





► **Fuerza Radial**

Áreas proximal y distal con fuerza radial aumentada para una mejor fijaci3n y sellado.

► **Marcas Radiopacas Revestimiento**

Proximal y distal para facilitar el posicionamiento y ubicaci3n de la endopr3tesis

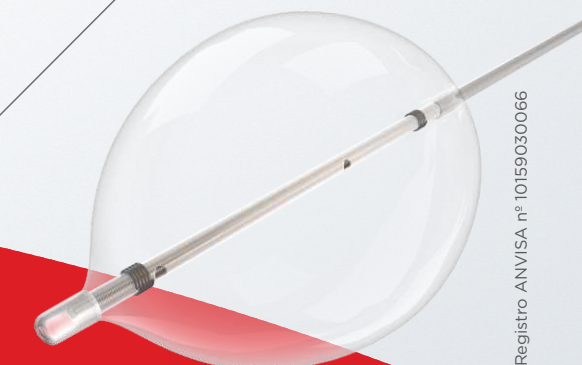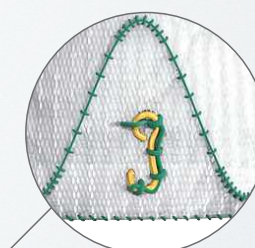

► **Catéter Bal3n**

Flexible para acomodar la endopr3tesis 12Fr/45mm
Suministrado por separado

Fijaci3n por medio de Fuerza Radial
Sobremedida recomendada de 15 a 20% del el diámetro del cuello de fijaci3n