

# SISTEMA HEMOSTÁTICO


Película hemostática

Válvulas hemostáticas

# AUREUS®

INTRODUCTOR EXPANDIBLE

- ▶ Reducción de perfil para cualquier dispositivo endovascular percutáneo;
- ▶ Solución de hemostasia para procedimientos endovasculares;
- ▶ Fácil acceso para anatomías tortuosas, calcificadas y/o de diámetro reducido;
- ▶ Acceso para angiografías con radiopacidad e hidrofília.

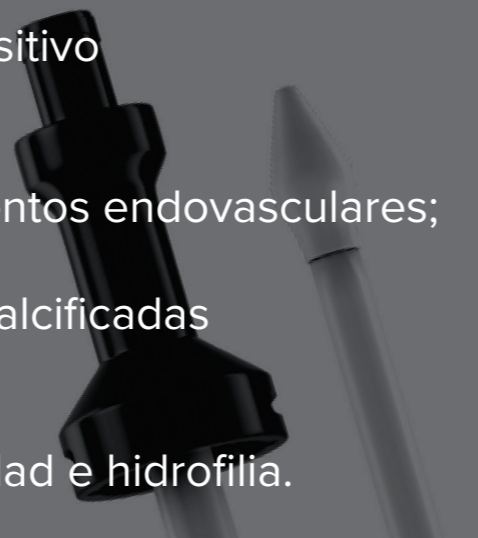

# VAINA HIDROFÍLICA




**Descripción:** El Introducitor expandible Aureus® consta de una vaina expandible hidrófila, un dilatador para facilitar el acceso vascular percutáneo transfemoral y un expansor para promover la expansión radial de la vaina expandible. La vaina expandible tiene radiopacidad en toda su longitud y presenta una marca radiopaca distal para indicar la terminación del dispositivo. El dilatador y el expansor tienen radiopacidad en toda su longitud.

**Indicación:** El Introducitor expandible Aureus® está diseñado para el acceso vascular percutáneo transfemoral con la ayuda de una guía de hasta 0,035" y, una vez insertado y expandido, proporciona acceso y guía para dispositivos de hasta 22Fr.

## AMPLIABLE HASTA 22 FR

14 Fr

22 Fr

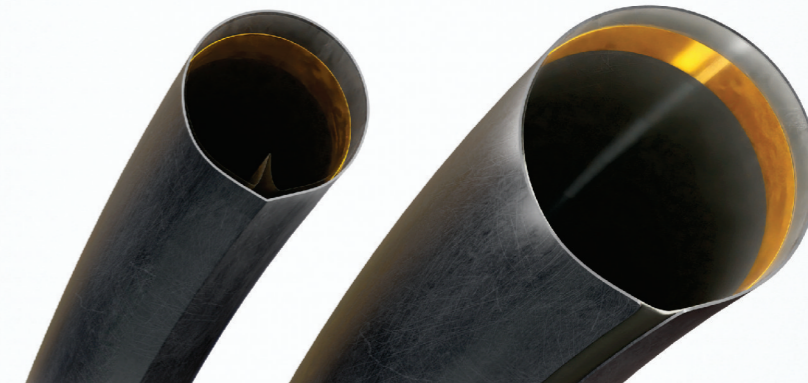

	Modelo Corto	Modelo Largo
Calibre Inicial	14 Fr	14 Fr
Calibre Final	22 Fr	22 Fr
Vaina	140 mm	260 mm

Kit compuesto por:



**Vaina Hidrofílica**

Inicialmente 14 Frenchs  
Se expande a 22 Frenchs

**Dilatador**

**Expansor**