

# Vesto<sup>®</sup>




 **BRAILE**

LIFE-SAVING TECHNOLOGIES


El Stent Vascular – Endoprótesis Vesto® es un dispositivo destinado a la implantación permanente en el sistema arterial periférico. Está compuesto por una estructura metálica autoexpandible de nitinol recubierta con politetrafluoroetileno (PTFE) y fibras de poliéster. Esta estructura evita el estiramiento del stent.

Vesto® está indicado para el tratamiento endovascular de enfermedades como oclusiones, estenosis, disecciones y aneurismas localizados en las arterias ilíacas y femorales superficiales.

## Stent flexible y autoexpandible

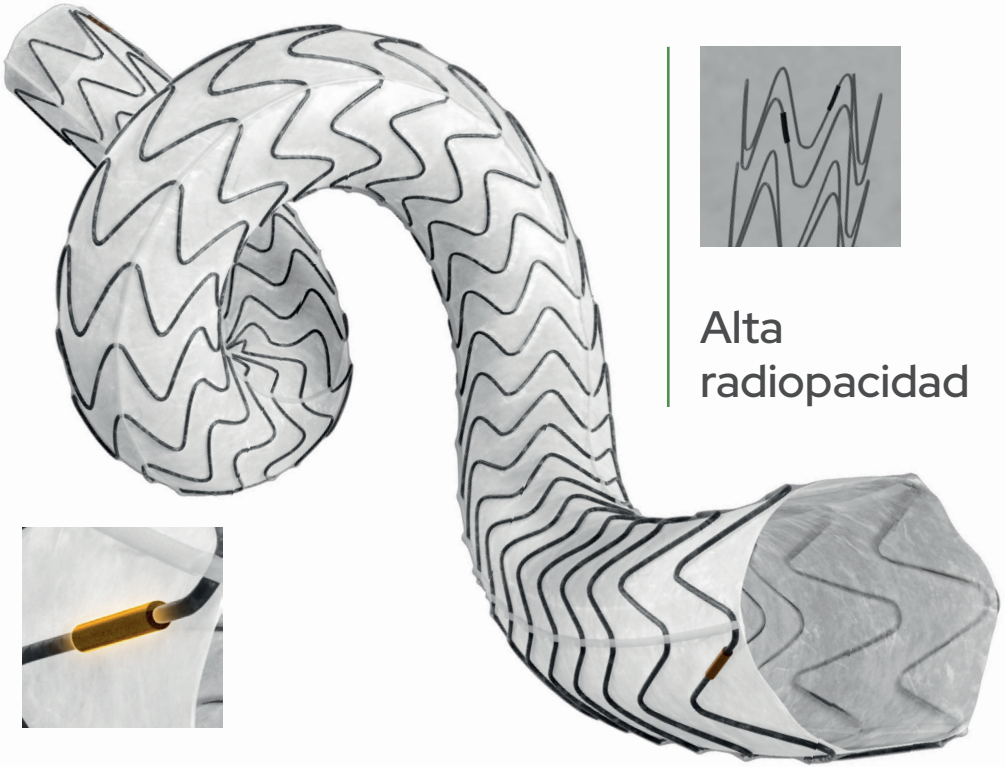

Alta  
radiopacidad

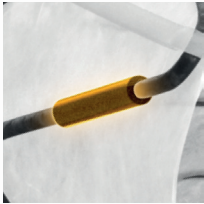


Marcadores radiopacos  
de oro en los extremos

## Sistema de Entrega

**Punta radiopaca** que permite la orientación durante la navegación del sistema de entrega y la implantación de la prótesis endovascular.

**Diseño atraumático** que previene daños vasculares durante la navegación del sistema de entrega.

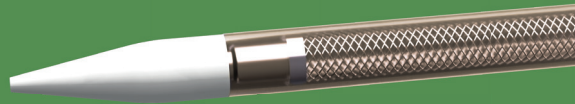

Excelente navegabilidad gracias a una vaina reforzada, flexible y antiacodamiento con recubrimiento hidrofílico.

## Vesto Largo

Sistema de entrega de 120 cm de longitud

Código	Descripción - Diámetro (mm) x Longitud (mm)	Perfil
616898	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Largo 6/60	8Fr
616899	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Largo 6/80	8Fr
616900	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Largo 6/100	8Fr
616901	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Largo 6/120	8Fr
616902	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Largo 6/140	8Fr
616903	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Largo 8/60	9Fr
616904	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Largo 8/80	9Fr
616905	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Largo 8/100	9Fr
616906	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Largo 8/120	9Fr
616907	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Largo 8/140	9Fr
616908	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Largo 10/60	10Fr
616909	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Largo 10/80	10Fr
616910	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Largo 10/100	10Fr
616911	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Largo 10/120	10Fr
616912	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Largo 10/140	10Fr
616913	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Largo 12/60	11Fr
616914	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Largo 12/80	11Fr
616915	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Largo 12/100	11Fr
616916	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Largo 12/120	11Fr
616917	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Largo 12/140	11Fr
616918	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Largo 14/60	12Fr
616919	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Largo 14/80	12Fr
616920	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Largo 14/100	12Fr
616921	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Largo 14/120	12Fr
616922	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Largo 14/140	12Fr



## Vesto Corto

Sistema de entrega de 70 cm de longitud



Código	Descripción - Diámetro (mm) x Longitud (mm)	Perfil
619267	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Corto 6/60	8Fr
619268	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Corto 6/80	8Fr
619269	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Corto 6/100	8Fr
619270	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Corto 6/120	8Fr
619271	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Corto 6/140	8Fr
619272	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Corto 8/60	9Fr
619273	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Corto 8/80	9Fr
619274	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Corto 8/100	9Fr
619275	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Corto 8/120	9Fr
619276	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Corto 8/140	9Fr
619282	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Corto 10/60	10Fr
619283	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Corto 10/80	10Fr
619284	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Corto 10/100	10Fr
619285	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Corto 10/120	10Fr
619286	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Corto 10/140	10Fr
619297	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Corto 12/60	11Fr
619298	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Corto 12/80	11Fr
619299	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Corto 12/100	11Fr
619300	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Corto 12/120	11Fr
619301	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Corto 12/140	11Fr
619302	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Corto 14/60	12Fr
619303	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Corto 14/80	12Fr
619304	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Corto 14/100	12Fr
619305	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Corto 14/120	12Fr
619306	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Corto 14/ 140	12Fr

Síguenos en las redes sociales:

 /brailebiomedica

 @brailebiomedica



**Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.**

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 | Jardim Tarraf I

CEP 15091-450 | São José do Rio Preto - SP | Brasil

CNPJ: 52.828.936/0001-09 | Anvisa no. 10159030113

Responsable Técnico: Vlademir D. A. Ramirez - CRF-SP 09010