


INOVARE

Alpha



 **BRAILE**

LIFE-SAVING TECHNOLOGIES

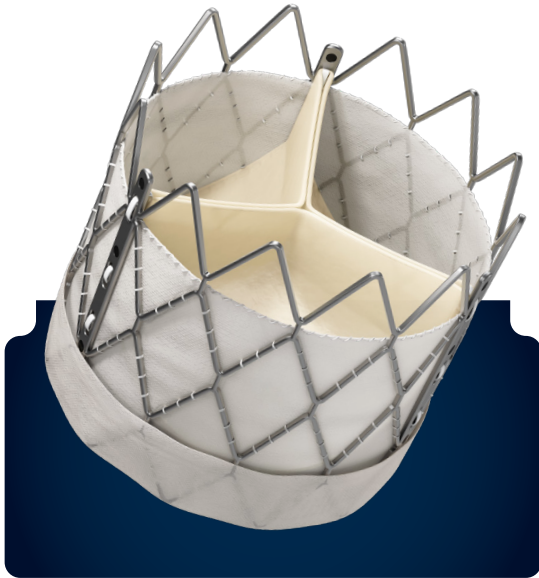

Basada en el diseño y el desempeño comprobado de la familia de válvulas INOVARE.

Indicada para pacientes con Estenosis Valvular Aórtica Calcificada y para reemplazar la válvula mitral mediante implante transcatóter valve-in-valve.

Beneficios y Diferenciales




Celdas abiertas grandes

Facilitan el acceso al ostium coronario



Falda externa de poliéster (PET)

Sellado eficiente para reducir la fuga paravalvular

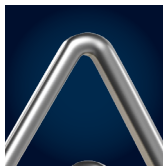

Aleación de cromo-cobalto

Estructura con mayor fuerza radial y menor retroceso




Postes con marcadores radiopacos

Estabilidad, precisión y seguridad

- Valvas producidas a partir de un único parche de pericardio bovino: menos suturas y mayor área efectiva de orificio (EOA).
- Tratamiento Oxidativo – Reox: tratamiento anticalcificación del pericardio bovino.
- Optimización del tiempo quirúrgico: reducción del pinzamiento aórtico y del tiempo de circulación extracorpórea.

Una solución para pacientes que se encuentran en el espacio entre la cirugía convencional y el TAVI, pacientes con anillo aórtico pequeño (riesgo de mismatch), necesidad de procedimientos concomitantes y cirugías mínimamente invasivas.

Sistema de Entrega

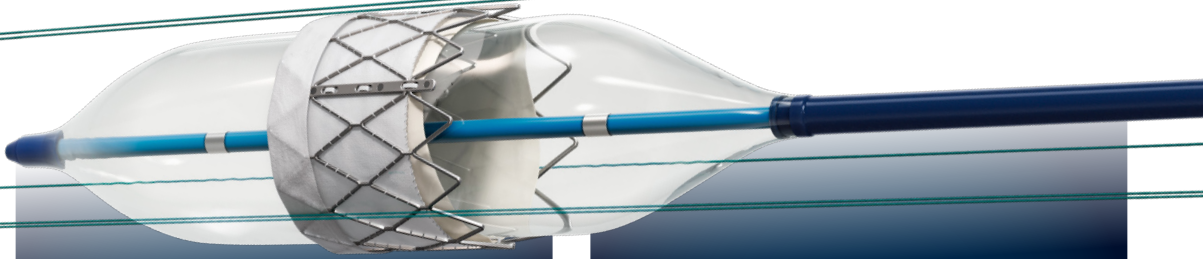


Balón no complaciente

Optimiza el posicionamiento de la prótesis en el anillo valvular mediante una expansión uniforme

Vástago flexible

Ajuste de la angulación y aproximación al anillo aórtico


Más que una válvula,
una estrategia a largo
plazo.

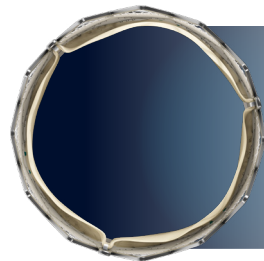


Componentes para el procedimiento




Prótesis Valvular Biológica
Inovare Alpha®
Tamaños 20, 22, 24, 26, 28 y 30 mm

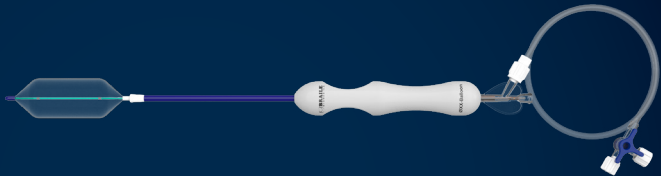

Dispositivo de Entrega Balón

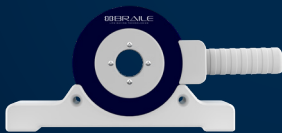

Ajustador

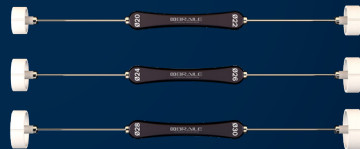

Kit de Medidores de Válvula

Kit Inovare Alpha®

Código	Tamaños
604405	20 mm
604406	22 mm
604407	24 mm
604408	26 mm
604409	28 mm
607249	30 mm



Para más información,
haga clic aquí o utilice el
código QR al lado.

Síguenos en las redes sociales:

 /brailebiomedica

 @brailebiomedica



Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 | Jardim Tarraf I

CEP 15091-450 | São José do Rio Preto - SP | Brasil

CNPJ: 52.828.936/0001-09 | Anvisa no. 10159030095

Responsable técnico: Vlademir D. A. Ramirez - CRF-SP 09010