


INOVARE

Alpha



 **BRAILE**

LIFE-SAVING TECHNOLOGIES

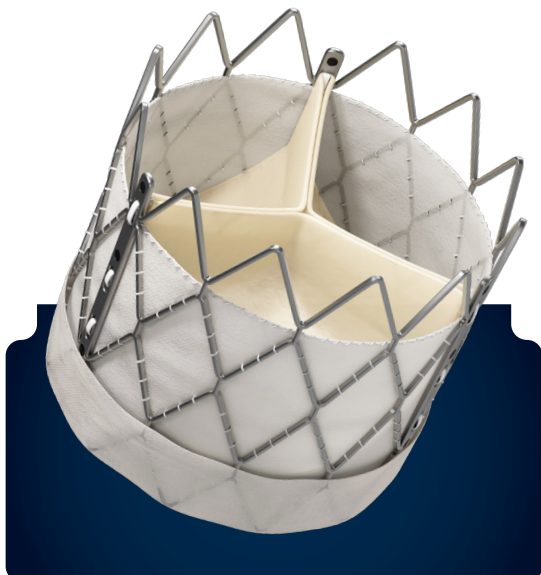

Baseada no design e no desempenho comprovado da família de válvula INOVARE.

Indicada para pacientes com Estenose Valvar Aórtica Calcificada e substituir, via implante transcaterter valve-in-valve, a válvula mitral.

Benefícios e diferenciais




Células abertas grandes

Facilitam o acesso ao óstio coronariano



Saia externa em poliéster (PET)

Vedação eficiente na redução do vazamento paravalvar

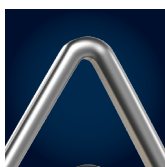

Liga de cromo-cobalto

Estrutura com força radial aumentada e recuo reduzido




Postes com marcadores radiopacos

Estabilidade, precisão e segurança

- Folhetos produzidos a partir de um único patch de pericárdio bovino: menos suturas e maior área de orifício efetiva (AOE).
- Tratamento Oxidativo - Reox: tratamento anticalcificante do pericárdio bovino.
- Otimização do tempo cirúrgico: diminuição do pinçamento aórtico e tempo de circulação extracorpórea.

Uma solução para pacientes que estão no gap entre cirurgia convencional e TAVI, pacientes com anel aórtico pequeno (risco de Mismatch), necessidade de procedimentos concomitantes e cirurgias minimamente invasivas.

Sistema de Entrega

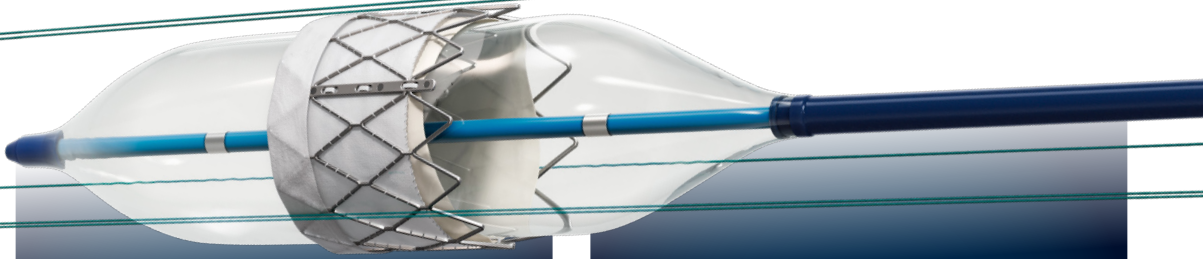


Balão não complacente

Otimiza o posicionamento da prótese no ânulo valvar com sua expansão uniforme

Haste Maleável

Ajuste da angulação e aproximação ao ânulo aórtico


Mais do que uma válvula, uma estratégia de longo prazo.

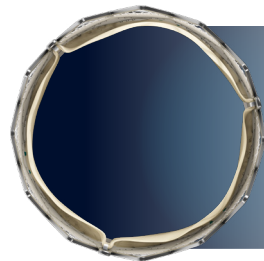


Componentes para procedimento




Prótese Valvular
Biológica Inovare Alpha®
Tamanhos 20, 22, 24, 26, 28 e 30 mm

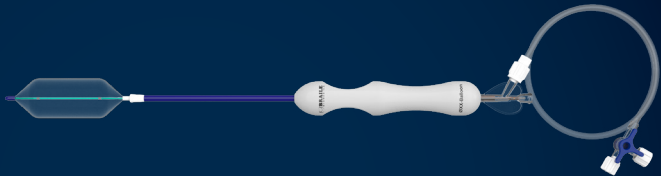

Dispositivo de Entrega por Balão

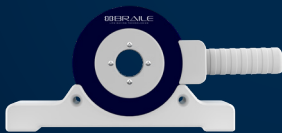

Crimpador

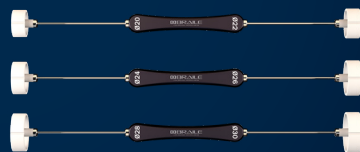

Kit Medidor de Válvula

Kit Inovare Alpha®

Código	Medida
604405	20 mm
604406	22 mm
604407	24 mm
604408	26 mm
604409	28 mm
607249	30 mm



Para mais informações clique aqui ou use o QRCode ao lado.

Nos siga nas redes sociais:

 /brailebiomedica

 @brailebiomedica



Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 | Jardim Tarraf I

CEP 15091-450 | São José do Rio Preto - SP | Brasil

CNPJ: 52.828.936/0001-09 | Anvisa no. 10159030095

Responsável técnico: Vlademir D. A. Ramirez - CRF-SP 09010